



## Компания ADAMUS HT на выставке ACHEMA 2012

**М**з 25 польских экспонентов ACHEMA 2012 интересную для фармацевтов продукцию представляла компания Adamus HT. Помимо широкого ассортимента высококачественных инструментов и запасных частей для таблеточно-формирующих машин, особый интерес посетителей вызвали автоматическая машина для микротонкой полировки инструментов таблет-пресса PA300 / PA500 pharma и бесконтактное, автоматическое, точное оптическое устройство измерения пуансонов АНТММ 100, использующее конфокальный микроскоп и оптический микрометр.



Разработанная компанией полировочная машина позволяет проводить полировку в автоматическом режиме до 80 пуансонов формата EU19 (B) и до 60 пуансонов формата EU1 (D). Держатели сконструированы таким образом, чтобы разместить весь комплект верхних и нижних пуансонов наиболее распространенных размеров.

Управление машины осуществляется посредством операционной панели с цветным сенсорным экраном. Удобное для пользователя меню позволяет производить простую установку параметров и обеспечивает бесперебойную работу машины. Список аварийных сигналов сообщает оператору текущий статус устройства.



Машина имеет три режима функционирования: автоматический, ручной и режим смешивания. Каждый из них предназначен для определенной задачи, на экране отображается соответствующая информация в качестве помощи оператору. В соответствующий момент система, на основании таймера полировочного цикла, сообщит о необходимости замены полировочного гранулята, что гарантирует неизменные условия полировки.

К преимуществам оптического устройства измерения пуансонов АНТММ 100 можно отнести возможность проведения точных бесконтактных измерений и графического отображения измерений пуансона, встроенную базу данных по пуансонам, создание сертификатов измерения, простоту в управлении и компактный дизайн.

Большинство коммерческих решений включает определенное количество ограничений, которые приводят к необходимости контакта с измеряемой поверхностью. Данное решение предлагает производить измерения в вертикальном положении, то есть один элемент направлен на ось Z. Данный подход обеспечивает безграничный доступ к измеряемой поверхности и точкам, он возможен только благодаря применению современных бесконтактных сенсорных систем.

### СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ:

- Пуансоны и матрицы любой сложности для таблеточниц, прессов, применяемых в фармацевтической промышленности
- Головки для таблеточниц новые и регенерируем старые
- Кулачки из пластмасс, бронзы и стали
- Наливающие устройства
- Пластины засыпающих устройств для таблеточниц
- Полный ассортимент устройств для блистрирования
- Другие запчасти для таблетпрессов и устройств по индивидуальным заказам
- Полный ассортимент устройств для капсулирования

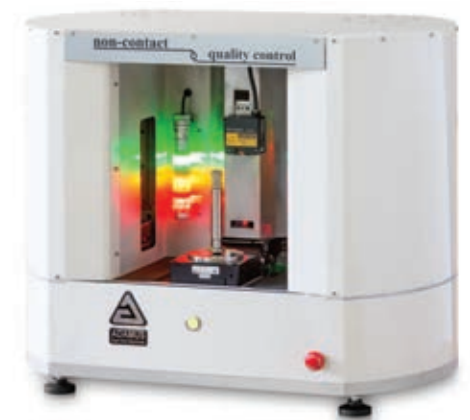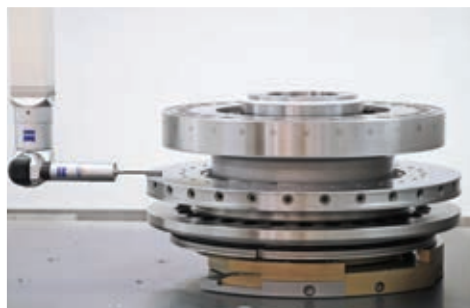

Tooling. Let us do our job.

## 30 лет опыта

в разработке и производстве высококачественных инструментов и запасных частей для таблеточно-формирующих машин, а также для линий по производству блистерной упаковки.



ADAMUS HT  
MACHINE FACTORY GROUP



GL ISO 9001  
GL Systems Certification

### Польша:

Monika Gutkowska  
тел. +48 91 45 99 134  
факс +48 91 45 99 139

E-mail: monika.gutkowska@adamus.com.pl

### Россия:

Мария Афанасьева  
тел.: +7 926 211 22 48  
E-mail: masha.afanasieva@mail.ru

### Украина:

Вера Гриб  
тел. +38 067 466 81 38  
факс +38 044 463 69 34  
E-mail: arita2004@ukr.net



ADAMUS HT Sp. z o.o., ul. Robotnicza 3a, 71-712 Szczecin POLAND  
Phone +48 91 45 99 100, Fax +48 91 45 99 139, E-mail: marketing@adamus.com.pl

www.adamus.com.pl